

Czasze / płaszcze / grzejne Electrothermal seria EMV i EMX

Odmiana czasz serii EM przeznaczona do kolb o różnych pojemnościach i lejków.

Ogólna charakterystyka obu serii:


- Specjalny kształt elementu grzejnego i otwór w dnie umożliwia stosowanie kolb o różnych objętościach i lejków o kącie rozwarcia 60°.
- Wbudowany regulator mocy grzewczej.
- Element grzejny w osnowie z włókna szklanego.
- Estetyczna i odporna chemicznie obudowa wykonana z polipropylenu.
- Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz aparatu powoduje, że obudowa nie ulega nagrzaniu.
- przełącznik umożliwiający wyłączenie górnej części elementu grzejnego (z wyjątkiem modelu EMV0050/CE).
- W obudowie znajduje się uchwyt do mocowania na statywie (3 uchwyty w modelach do kolb o pojemności powyżej 1 litra).
- Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elementu grzejnego bez pomocy serwisu.
- Maksymalna temperatura elementu grzejnego: 450°C.

Płaszcze serii **EMV** wyposażono w uziemioną, stalową siatkę ochronną zabezpieczającą użytkownika przed porażeniem w przypadku zalania elementu grzejnego.

W płaszczach serii **EMX** zamiast siatki zastosowano pełny ekran ze stali nierdzewnej chroniący element grzejny przed zalaniem.



Czasza grzejna serii EMX

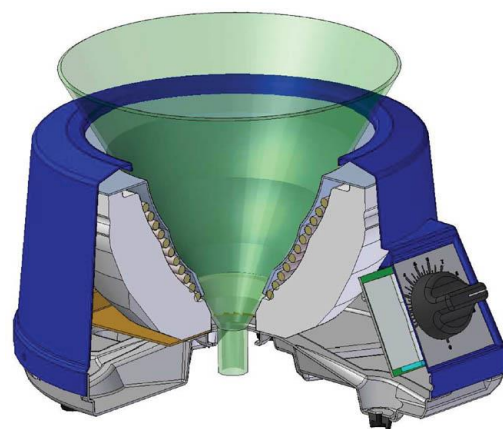

Przekrój czasz grzewczych serii EMV i EMX

Numer katalogowy:	Do kolb o pojemności:	Do lejków o średnicy:	Moc grzejna:
EMV0050/CE	50 ml *	od 50 mm do 100 mm	60 W
EMV0250/CE	100, 150 i 250 ml	od 75 mm do 100 mm	100 + 50 W
EMV1000/CE	500 i 1000 ml	od 100 mm do 200 mm	200 + 100 W
EMV5000/CE	2000, 3000 i 5000 ml	od 200 mm do 300 mm	500 + 300 W
EMX1000/SCE	od 50 ml do 1000 ml	od 50 mm do 150 mm	150 + 80 W
EMX5000/SCE	od 500 ml do 5000 ml	od 100 mm do 300 mm	400 + 200 W

* - Także do kolb gruszkowych 10, 25 i 50 ml.

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja: 1 rok.
- Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.
- Producent: Electrothermal (Anglia).