

Przystawka Helipath

Przystawka do miękkich ciał stałych (niepłynących)



Przystawka zaprojektowana w celu umożliwienia wiarygodnych badań próbek o konsystencji półpłynnej. Dobrze użyte akcesorium pozwala na powtarzalne pomiary kontrolne bardzo trudnych próbek takich jak kremy, pasty i żele stwarzających problemy w badaniach innymi przyrządami.


Skład zestawu



1. Statyw z ogranicznikami
2. Uchwyt kroczący
3. Komplet 6 wrzecion typu T
4. Zawieszka zaciskowa z ciężarkiem

Opcja z szybkozłączem

Dostępna w wersji ze złączem magnetycznym.

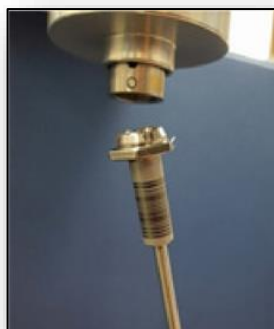

Zasada działania

Uchwyt kroczący powoduje powolny ruch głowicy aparatu w dół i do góry po statywie. W tym czasie wrzeciono wykonuje ruch posuwisto/spiralny wewnątrz próbki eliminując problem jej niejednorodności oraz braku adhezji do gładkich wrzecion standardowych.

Orientacyjne, względne zakresy pomiarowe [cP], [mPa·s]

| | DV1 DVE Analogowy | DV2T | DVNext |
|----|-------------------------|--------------|--------------|
| LV | 156 - 3,120K | 156 - 9,360K | 156 - 9,360K |
| RV | 2K - 20M | 2K - 100M | 2K - 100M |
| HA | 4K - 40M | 4K - 200M | 4K - 200M |
| HB | 16K - 160M | 16K - 800M | 16K - 800M |

Zgodność

Akcesorium zgodne ze wszystkimi wiskozymetrami standardowymi Brookfield.

LABO PLUS

www.laboplus.pl

Autoryzowany dystrybutor i centrum serwisowe
ul. Obornicka 5, 02-948 Warszawa,
t: +48 22 646 77 27, poczta@laboplus.pl