

Przystawka ULA

Przystawka do pomiarów niskich lepkości



Przystawka zaprojektowana w celu obniżenia dolnej granicy pomiarowej wszystkich standardowych modeli wiskozymetrów. Dodatkowym atutem jest mała objętość próbki oraz geometria cylindryczna umożliwiająca pomiar lepkości absolutnej


Skład zestawu



1. Szyna mocująca
2. Płaszcz
3. Otwarte naczynie pomiarowe
4. Zacisk
5. Kapturek
6. Wrzeciono pomiarowe

Opcjonalne naczynie zamknięte

Przystawka może być wyposażona w naczynie zamknięte wykonane wraz z wrzecionem ze stali o podwyższonej odporności chemicznej 316s/s.

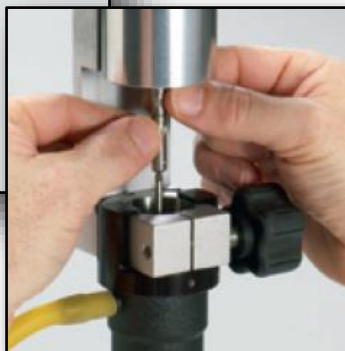

Zgodność


Akcesorium zgodne ze wszystkimi wiskozymetrami standardowymi Brookfield.

Mała objętość próbki

16mL próbki w dobrze termostatowanym naczyniu.

Opcja z szybkozłączem magnetycznym

Dostępna w wersji ze złączem magnetycznym do wszystkich nowych wersji wiskozymetrów .

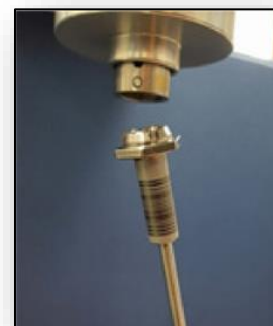

Zakres temperatur pracy

Wersja standardowa z otwartym naczyniem pomiarowym

1°C – 60°C

Wersja z zamkniętym naczyniem pomiarowym

1°C – 99°C

Zakresy pomiarowe [cP], [mPa·s]

Wszystkie modele LV	RVT DVE RV DV1 RV	DV2T RV DVNext RV	HAT DVE HA DV1 HA	DV2T HA DVNext HA	HBT DVE HB DV1 HB	DV2T HB DVNext HB
1.0 - 2K	6.4 - 2K	3.0 - 2K	12.8 - 2K	6.0 - 2K	51.2 - 2K	24.0 - 2K

LABO PLUS

www.laboplus.pl

Autoryzowany dystrybutor i centrum serwisowe
ul. Obornicka 5, 02-948 Warszawa,
t: +48 22 646 77 27, poczta@laboplus.pl